

Gebrauchsanweisung

Airbox Twin

Herzlichen Glückwunsch für Ihre Wahl !!

Durch die Wahl dieses Gerät haben Sie ein besonders zuverlässiges Arbeitsgerät erworben, das Ihnen Ihre Bearbeitungen erleichtern wird. Dieses Gerät ist mit dem Qualitätszeichen des TÜVs ausgestattet und entspricht den Maschinenrichtlinien 89/392/CE, und verfügt somit über das CE Prüfzeichen.

Wichtig!

Vor der Installation des Gerätes ist das folgende Handbuch aufmerksam durchzulesen und für künftige Konsultationen aufzubewahren.

Sicherheitsbestimmungen

- alle im folgenden Handbuch aufgeführten Anweisungen aufmerksam befolgen
- während aller Wartungsarbeiten ist das Stromkabel von der elektrischen Stromversorgung und/oder der Wasseranschluß und/oder andere Anschlüsse externer Bauteile an dem Gerät zu trennen
- während der Wartungsarbeiten keine Fremdkörper in das Innere der Maschinerie einführen
- für die Auffüllungs- und/oder Wartungsarbeiten das mitgelieferte Zubehör verwenden
- keine anderen Wartungsarbeiten als die im Handbuch aufgeführten durchführen, jeglicher nicht in der Dokumentation vorgesehene Eingriff kann Risiken mit sich bringen, für Arbeiten dieser Art ist sich an den technischen Kundendienst zu wenden
- bevor der Stecker in die Steckdose eingesteckt wird, ist sicherzustellen, dass die Netzspannung derjenigen auf dem Typenschild an der Rückseite der Maschine entspricht

Achtung


- keinerlei Wartungsversuche unternehmen, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist: Gefahr von Stromschlägen!!!
- im Falle von Eingriffen des technischen Kundendienstes, die nicht bei uns durchgeführt werden, sind ausschließlich Originalersatzteile zu verwenden. Die Verwendung von nicht Originalersatzteilen lässt die eventuelle verbleibende Garantie verfallen, ausserdem entspricht das Gerät nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen
- für jegliche Information hinsichtlich Installation, Wartung und Gebrauch wenden Sie sich an den Roos Dental Kundendienst

Auspacken

Die Unversehrtheit der Verpackung bei Erhalt des Gerätes überprüfen. Überprüfen, dass in der Konfektion alle Bauteile und das mit dem Gerät serienmäßig gelieferte Zubehör enthalten sind:
1x Stromzufuhrkabel, 1x Ansaugrohr mit Anschlüssen,
4x Airbag-Filtern (14), technische Dokumentation, Garantie

Installation

1. Die Airbox an einem Ort aufstellen, an dem diese leicht zugänglich für den Austausch des Airbox-Filterbeutel (14) und den regelmäßigen Austausch des Motorschutzfilters (12) ist.
ACHTUNG: Nicht in Möbeln oder an Orten ohne Luftzirkulation aufstellen.
2. Die seitliche Luke öffnen (33), indem Sie die beiden Knöpfe (32) drehen.
3. Das Ansaugrohr durch leichten Druck (5) in den entsprechenden Einhakring einsetzen.
4. Den perfekten Sitz des Staubfilters (14) in den entsprechenden Sitz aus Plexiglas des Ansaugrohrs (5) sicherstellen und die seitliche Luke (33) wieder schließen.
5. Das Stromkabel mit der Airbox verbinden und mit dem Stromnetz verbinden (Aufnahmeleistung max 1000W). Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung derjenigen auf dem Typenschild entspricht.
6. Das andere Ende des Ansaugrohrs (5) dort anschließen, wo die Ansaugung erfolgen soll: Arbeitstisch, Feinbearbeitungstisch, Sandstrahlapparate, u.ä.

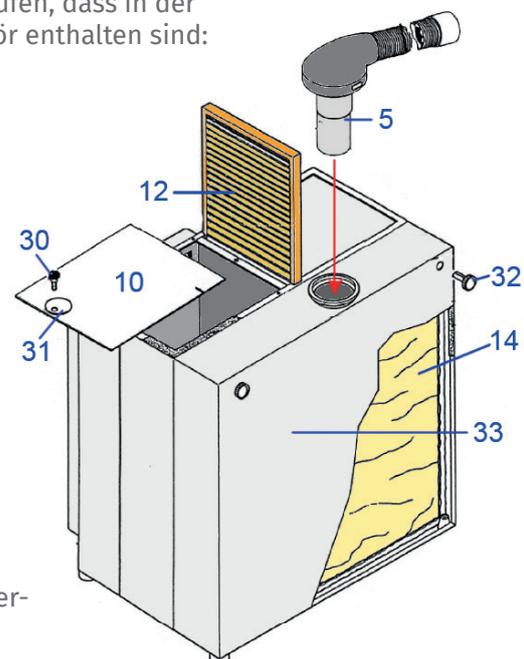

7. Nun ist die Airbox betriebsbereit und kann durch Drücken des Hauptschalters eingeschaltet und die Ansaugleistung durch Betätigung des Potentiometers (min. 400W - max. 1000W) reguliert werden.
8. **BITTE BEACHTEN:** Der Airbox-Filterbeutel (14) hat eine äußerst wichtige Funktion für den einwandfreien Betrieb des Gerätes und Ihre Gesundheit. Er ist regelmäßig zu überprüfen und auszutauschen, bevor er vollständig gefüllt ist. Nicht wieder verwenden und nicht entleeren. Durch Nichtbeachtung verfällt die Garantie des Gerätes. Sobald der Filter voll ist, die Öffnung mit einem Klebeband verschließen und auf geeignete Weise entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Wartung

Austausch des verbrauchten Staubfilters:

1. Die seitliche Luke der Airbox öffnen (33), den verbrauchten Staubbeutel alle 4/5 Tage kontrollieren und austauschen bevor er vollständig voll ist (max. ungefähr 2/3 des Fassungsvermögens).
2. Einen neuen Filter durch leichten Druck nach oben einsetzen, bis der neue Beutel gut in der Muffe aus Plexiglas fest sitzt (5). Den gebrauchten Filter nicht wieder verwenden und nicht entleeren. Sobald der Filter voll ist, die Öffnung mit einem Klebeband verschließen und auf geeignete Weise entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Austausch des Motorschutzfilters:

1. Den Lukenschließknopf (30) lockern, den Lukenschließstab (31) drehen, ziehen und den Filter nach oben herausziehen. Den neuen Filter (12) einsetzen und alles wieder schließen, indem die Operationen in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt werden.
2. Alle zwei Wochen den Motorschutzfilter kontrollieren und reinigen, indem Druckluft in denselben in der gleichen Durchgangsrichtung der angesaugten Luft eingeblasen wird. Der Filter muß maximal alle 4 Monate durch einen neuen ausgetauscht werden. Dies schützt den Motor und den einwandfreien Betrieb des Gerätes.

Fehlerbehebung

Der Ansauger schaltet sich nicht ein:

1. Kontrollieren, dass das Stromkabel gut eingesetzt ist.
2. Kontrollieren, dass die Sicherungen nicht beschädigt sind.

Der Ansauger saugt weniger:

1. Den Staubfilter austauschen (14).
2. Den Motorschutzfilter austauschen (12).

Sollte das Gerät nach Durchführung dieser Kontrollen weiterhin Störungen aufweisen, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von ROOS-Dental (Tel. +49(0)2166-99898-0).

Technische Daten

Sicherungen:	2 von 5 x 20 mm zu 6,3 Ampere
Aufnahmeleistung:	max. 1000 Watt
Elektr. Versorgung:	230/50-60 V/Hz (siehe Typenschild auf dem Gerät)
Gewicht:	11 kg



Reparatur Service

professionell, schnell und günstig

REPARATUR **BOX**SERVICE

Kostenfreie Transportbox und Abholung

+49 (0) 2166 99898-0